




- ۱- نصب کنسول از طریق کابل به سیستم و به جریان برق
- ۲- قراردادن " Logger" بر روی کنسول
- ۳- Ebi Winlog 2000
- ۴- باز شدن پنجره ی Registration
- ۵- انتخاب گزینه ی Register Later ← باز شدن پنجره ی Log On

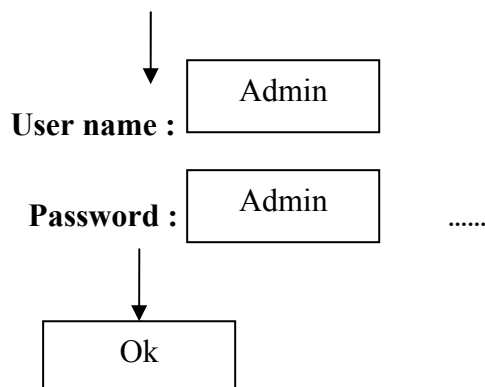

- ۶- باز شدن پنجره ی Ebi Wing 2000 ← انتخاب Program Logger

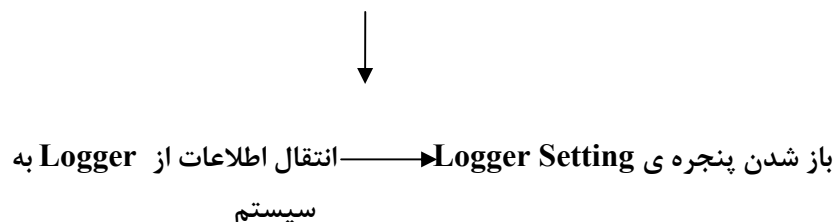

- ۷- در بخش title ← انتخاب یکی از Edit /Change Label

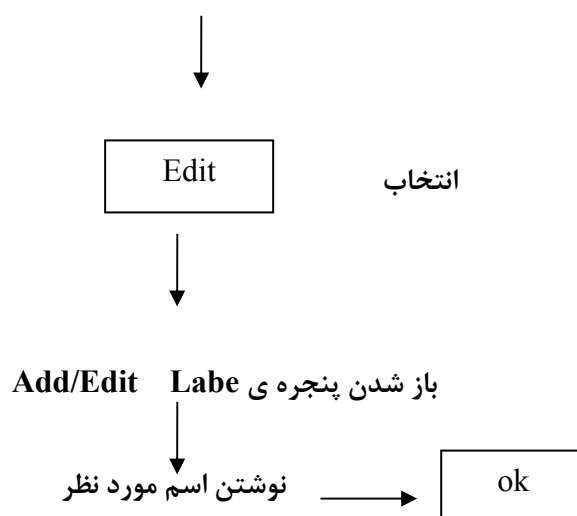


Limits Channel 1

Max =10000
Min = 0
Measuring mode

Endless Loop	*
--------------	---

Limits Channel 2

Max =140
Min =-40

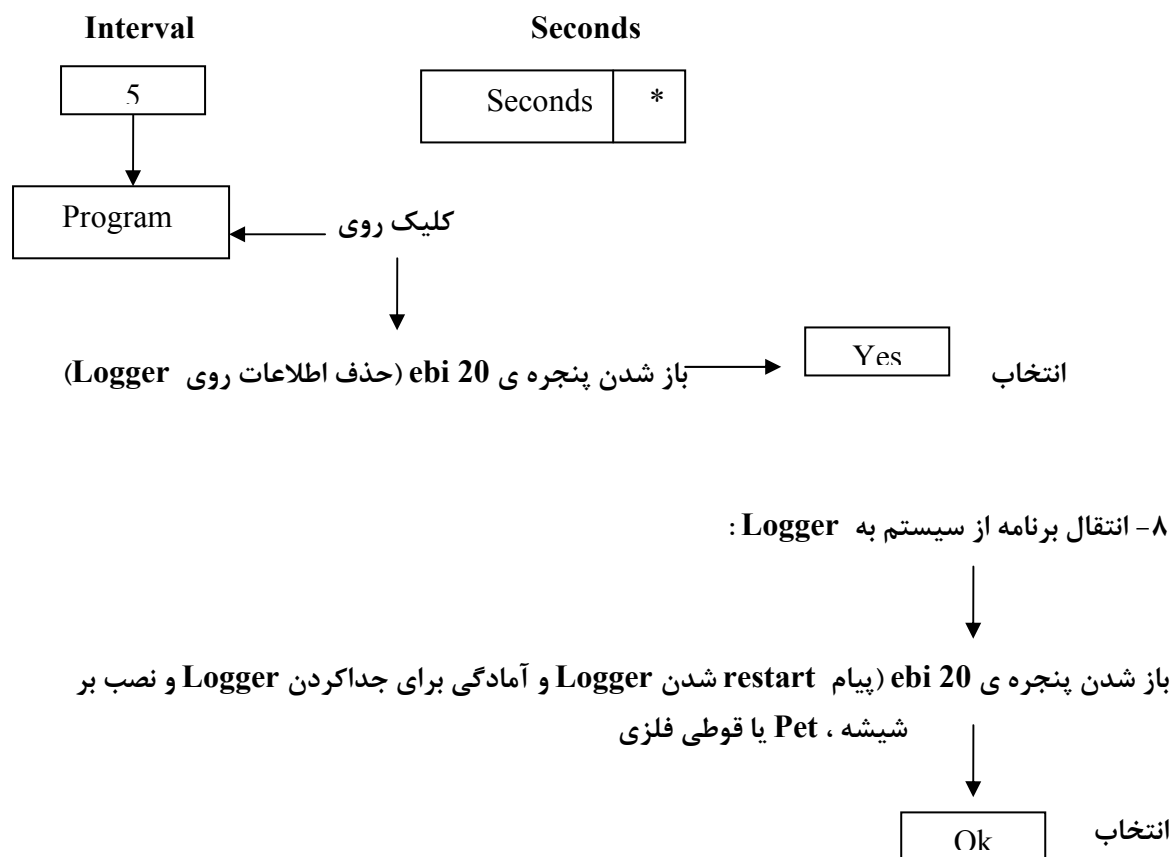

۹- جداکردن Logger از کنسول و قراردادن بر روی نمونه

۱۰- برداشتن Logger از روی درب و انتقال به کنسول

۱۱- انتخاب Real out Logger از پنجره ی Ebi Winlog 2000

Data



انتقال اطلاعات از Logger به سیستم



باز شدن پنجره ی Save file as



کلیک روی این بخش محل Save کردن اطلاعات را انتخاب می کنیم



Ok

انتخاب



باز شدن پنجره ی منحنی ها (Ebi Winlog 2000-Data Processing)